



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo Aggiornamento

Last updating

20/05/2022



SCHEMA TECNICA PRODOTTO **TECHNICAL DATA SHEET**

REF BSD003

**PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO PIATTO
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 50PZ.**

**MICROTITER PLATE 96 WELLS FLAT BOTTOM
INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 50 PCS.**

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

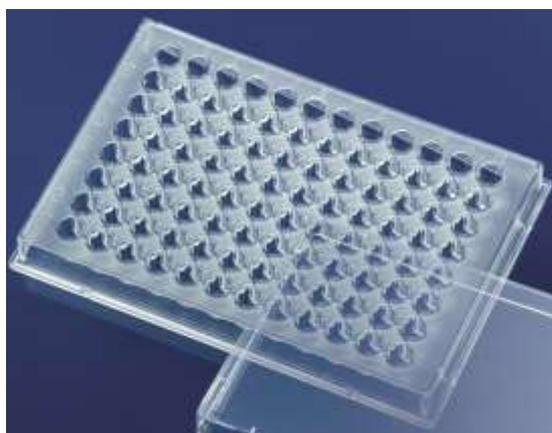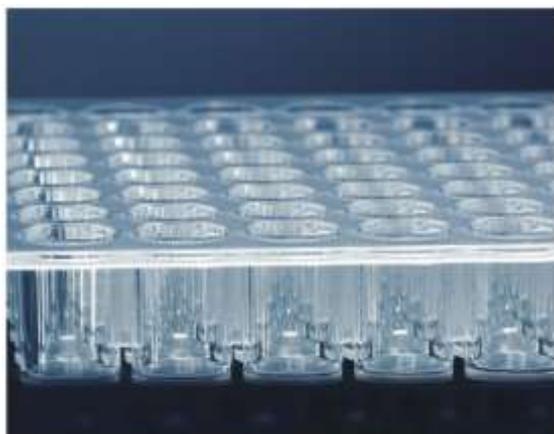

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Fabbricante	Anicrin Srl - Italy
Codice Fabbricante	M09600PO
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE
Lunghezza piastra (mm)	128,00
Larghezza piastra (mm)	85,80
Altezza piastra (mm)	14,10
Peso (g)	40,00 ±1
Capacità pozzetto(ml)	0,404
N° pozzetti	96

FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS

<i>Manufacturer</i>
<i>Manufacturer Code</i>
<i>Microbiological status</i>
<i>Material used</i>
<i>Length plate (mm)</i>
<i>Plate width (mm)</i>
<i>Plate height (mm)</i>
<i>Weight (g)</i>
<i>Well capacity (ml)</i>
<i>N. of Well</i>

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro
Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale
In Vitro Diagnostic Medical Device
For Professional Use Only

RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo Aggiornamento

Last updating

20/05/2022

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

TECHNICAL DATA SHEET

- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is opened,*
- Non variare la destinazione d'uso/ *Do not vary the intended purpose of the product,*
- Prodotto non adatto ai bambini/ *Keep out of reach of children,*
- Conservare in luogo asciutto/ *Store in dry place and far from the direct light,*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente/ *Disposal: use appropriate, personal protective equipment and act according to applicable regulations.*

DESTINAZIONE D'USO/DESTINATION USE:

I dispositivi della famiglia "**Micrometodi**" sono prodotti monouso destinati all'uso in laboratorio per contenere liquidi biologici per analisi diagnostiche in vitro.

ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO

L'uso e la manipolazione dei dispositivi è **riservata al personale medico e tecnico** con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

*The devices of the family "**Microtiter**" are disposable products for use in the laboratory to contain fluids for in vitro diagnostic tests.*

IN VITRO USE ONLY

The use and handling of the devices is given to medical and technical personnel with the necessary qualifications and professional training.

MATERIALI USATI PER LA PRODUZIONE/ MATERIALS USED IN PRODUCTION:

I materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stati selezionati sulla base delle proprietà indicate per le destinazioni d'uso individuali.

The materials used for the production of in vitro diagnostic medical devices have been selected on the basis of the properties specified for the individuals intended use.

I dispositivi relativi alla famiglia **Micrometodi** sono prodotti in: **polistirolo(PS)**.

Il polistirolo è un polimero rigido, atossico con un'ottima stabilità dimensionale e buona resistenza alle soluzioni acquose ma resistenza molto limitata ai solventi. E' perfettamente trasparente e viene comunemente usato per i prodotti monouso da laboratorio. Alla temperatura ambiente i prodotti sono rigidi e quindi possono fessurarsi o rompersi se cadono da un banco da laboratorio o altezze superiori.

*The devices related to the family "**Microtiter**" are produced in **polystyrene (PS)**.*

Polystyrene is a rigid polymer, non-toxic with excellent dimensional stability and good resistance to aqueous solutions but very limited resistance to solvents. It is perfectly transparent and is commonly used for disposable laboratory products. At room temperature the products are so rigid and can crack or break if dropped from a laboratory bench or higher heights.

MATERIALI USATI PER IL CONFEZIONAMENTO/ MATERIALS USED FOR PACKAGING:

Tutti i componenti utilizzati per l'imballaggio sono prodotti in materiali non inquinanti, idonei allo scopo a cui sono destinati./ *All components used for packaging are produced with non polluting material, for purpose they are intended.*